

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Kompaktowy masażer do mięśni LX-013

Deklarację Zgodności dla tego urządzenia można znaleźć pod linkiem: www.technaxx.de/ (na dolnym pasku „Konformitätserklärung”). Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi. Numer telefonu serwisowego do pomocy technicznej: 01805 013643 (14 centów/minutę z niemieckiej linii stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: support@technaxx.de

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość lub na wypadek udostępnienia produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

2-Letnia gwarancja

Funkcje

- Technaxx LX-013 to bezprzewodowe urządzenie do wibracyjnego masażu mięśni, które rozluźnia obolałe, sztywne mięśnie, zwiększa krążenie i zakres ruchu oraz poprawia ogólny stan zdrowia tkanek miękkich.
- 6 poziomów prędkości: 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 obr./min.
- Akumulator 12V 1500mAh
- 180 min. czasu pracy
- 5 różnych głowic do masażu
- Automatyczne wyłączenie po 10 min.

Dane techniczne

Wejście zasilacza sieciowego (tylko do użytku w pomieszczeniach)	230V
Moc zasilacza sieciowego	12,6V / 0,8A
Akumulator	12V / 1500mAh

Normalne użycie

Wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe.

- Ustaw przełącznik akumulatora w pozycję „ON (WŁ.)”, wskaźnik akumulatora zaświeci się na zielono (jeśli akumulator ma wystarczającą moc). Jeśli wskaźnik świeci na czerwono, naładuj akumulator.
- Zamontuj 1 z 5 głowic, zgodnie z własnymi potrzebami.
- Używaj tylko na suchej, czystej powierzchni ciała przez ubranie, delikatnie naciskając i przesuwając się po ciele przez około 60 sekund w jednym obszarze.
- Używaj LifenaXX LX-013 w razie potrzeby tylko na miękkiej tkance ciała, bez powodowania bólu lub dyskomfortu. Nie stosować na głowie ani na twardej lub kościstej części ciała.
- Używaj tylko aplikatorów, które zapewniają najlepszy pożądaný efekt.
- Siniaki mogą wystąpić niezależnie od ustawienia lub zastosowanego nacisku. Często sprawdzaj masowane miejsca i natychmiast wstrzymaj masaż przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu.
- Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tyłu aplikatora, ponieważ może dojść do przyszczypnięcia.

Opis produktu



1	Głowica masująca	5	Wskaźnik LED prędkości
2	Silnik o dużej prędkości z łagodnym rozruchem	6	Wskaźnik LED akumulatora

3	Akumulator	8	Przełącznik akumulatora
4	Przycisk Start i Poziom		

Główce od lewej do prawej



Rozwidlona:	odpowiednia dla mięśni i tkanek miękkich po obu stronach kręgosłupa
Płaska:	odpowiednia dla wszystkich części ciała (mięśni i tkanek miękkich)
Okrągła:	odpowiednia dla grup mięśni i tkanek miękkich
Punktowa:	odpowiednia dla mięśni i tkanek miękkich w pobliżu stawów
Miękka gumowa:	odpowiednia dla wszystkich części ciała (mięśni i tkanek miękkich)

Montaż głowic

W razie potrzeby wymień głowicę masującą. Aby to zrobić, wyjmij oryginalną głowicę z uchwytu (ilustracja po lewej) i włóż inną (ilustracja po prawej)



Instrukcje bezpieczeństwa

- Ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki AC.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o

ograniczonej sprawności umysłowej lub z brakiem doświadczenia i/lub brakiem kompetencji.

→ Urządzenie nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

→ Każde inne użycie lub modyfikację urządzenia uważa się za niewłaściwe i wiąże się ze znacznym ryzykiem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

→ Nigdy nie pozostawiaj LifenaXX LX-013 na chodzie lub podczas ładowania bez nadzoru.


PROSZĘ NIE UŻYWAĆ LIFENAXX LX-013 W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH BEZ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY LEKARZA:

cięża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, noszenie rozruszników serca, niedawna operacja, epilepsja lub migrena, przepuklina dysku, spondylolisteza, spondyloliza lub spondyloza, niedawna operacja wymiany stawu lub spirale, metalowe szpilki lub płytki, lub jeśli masz jakiegokolwiek obawy dotyczące Twojego zdrowia fizycznego. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie można używać wibracji ani sprzętu do ćwiczeń. Zalecamy jednak najpierw skonsultować się z lekarzem. Obecnie badane są skutki zastosowania wibracji w niektórych stanach medycznych. Prawdopodobnie doprowadzi to do skrócenia powyższej listy przeciwwskazań. Wiemy z praktyki, że włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia jest doradzane w wielu przypadkach. Należy tego dokonać za radą i w towarzystwie lekarza, specjalisty lub fizjoterapeuty.

OSTRZEŻENIA I PRZESTROGI:

Tylko do użytku dla dorosłych, przyłóż na suchą, czystą powierzchnię ubrania, lekko naciskając i przesuwając się po ciele. Czas aplikacji nie powinien przekraczać 60 sekund na obszar ciała. Używaj LX-013 tylko do miękkich tkanek i mięśni, jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, przerwij zabieg. Korzystaj wyłącznie z części dołączonych do zestawu. Punkty nacisku mogą występować niezależnie od ustawienia, kontroli lub przyłożonego nacisku. Regularnie sprawdzaj masowane obszary i natychmiast wstrzymaj masaż przy pierwszych oznakach bólu lub dyskomfortu. Trzymaj palce, włosy lub inne części ciała z dala od trzonu i tyłu aplikatora, ponieważ może dojść do przyszczypnięcia. Nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnej mieszanki znieczulającej z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu, a także w pobliżu łatwopalnych materiałów, oparów lub gazów. Nie używaj w pobliżu

otworów grzewczych lub w bezpośrednim świetle słonecznym. Utrzymuj urządzenie przez cały czas w stanie suchym i odłączaj je, gdy nie jest używane. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Częsta stymulacja przy użyciu dużej prędkości i nacisku na tym samym obszarze ciała spowoduje obtarcia. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast przestań korzystać z urządzenia. Upewnij się, że urządzenie nie jest w stanie roboczym podczas ładowania!

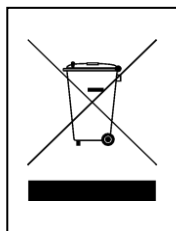

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Opakowania i surowce mogą zostać zutylizowane. Nie wyrzucaj starych urządzeń i baterii wraz z odpadkami komunalnymi. **Czyszczenie:** Chroń urządzenie przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem (używaj czystej szmatki). Unikaj stosowania szorstkich, gruboziarnistych materiałów lub rozpuszczalników/agresywnych środków czyszczących. Wytrzyj dokładnie wyczyszczone urządzenie. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy