

Lifenaxx[®] * manual de usuario

Pistola de Masaje Frío-Calor LX-041

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Guarde cuidadosamente este manual del usuario para para futuras referencias o para compartir productos. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, comuníquese con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el manual más reciente disponible en el sitio web del fabricante.

Características


El LifenaXX LX-041 es un masajeador vibratorio inalámbrico. Su uso reduce los dolores y molestias musculares, mejora la circulación sanguínea, relaja los músculos y mejora la flexibilidad muscular.

- Activa de calor y frío en 6 niveles, (30, 40, 45°C calor) y (10, 15, 20°C frío).
- 3 niveles de masaje
- 5 cabezales de masaje
- Hasta 180 min. de duración de la batería (2000 mAh)
- Motor sin escobillas
- Indicador de batería, calefacción y refrigeración
- Masaje vibratorio para todo el cuerpo

Especificaciones técnicas

Calefacción	35-40-45 (± 2) °C
Enfriamiento	15-10-20 (± 6) °C
Velocidad de masaje	Hasta 2800rpm
Amplitud	~8mm
Tiempo de funcionamiento	Hasta 3 horas
Tiempo de carga	Aprox. 4 horas
Conexión USB	USB-C con 5 V, máx. 2A
Batería	7,4V, 2000mAh
Tipo de motor	Motor sin escobillas
Material	Plástico ABS
Peso	620g
Dimensión	16,5 x 14,5 x 5 cm
Contenidos del paquete	LifenaXX Pistola de Masaje Frío-Calor LX-041, estuche portátil, cable de carga USB-C, manual de usuario, 5 cabezales de masaje

Descripción del producto

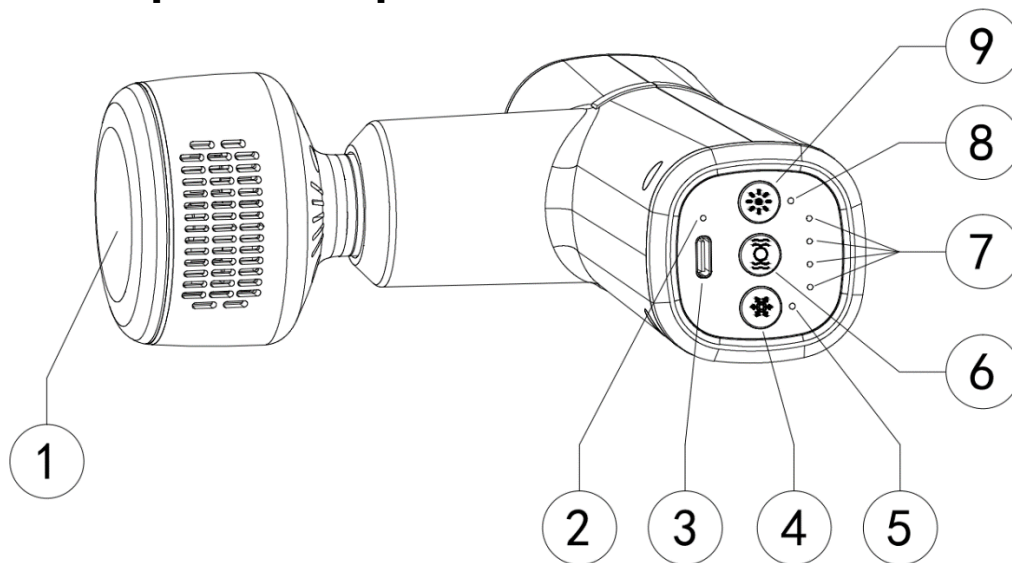

1	Cabezal de masaje frío/calor	6	Clave de activación del masajeador
2	Luz indicadora	7	Luz de intensidad del masajeador
3	Interfaz de carga USB tipo C	8	Luz indicadora de calefacción
4	Tecla de activación de refrigeración	9	Tecla de activación de calefacción
5	Luz indicadora del modo de refrigeración		

Uso

- 1) Seleccione uno de los 4 cabezales de masaje estándar que no estén refrigerados ni calentados e instálelo en el dispositivo.
- 2) Mantenga presionado el "Botón de activación del masajeador" para activar la función de masaje. Una vez activado, el dispositivo cambia a 1ª marcha de forma predeterminada, o puede cambiar a la marcha deseada presionando brevemente el "botón de activación del masajeador".
- 3) Para proteger mejor el producto, la función de masaje se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso continuo. Si aún necesita usarlo, puede reiniciarlo.
- 4) Si la máquina cambia a 0 marcha y no se realiza ninguna otra operación durante 1 minuto, también se apagará automáticamente.
- 5) Si el verde y el rojo parpadean alternativamente durante el uso, indica que el nivel de batería de la máquina es bajo y debe cargarse a tiempo.

Modo de refrigeración/calefacción:

Instale el cabezal de masaje de enfriamiento/calor incluido en el host e instálelo en su lugar.

Calefacción: Presione brevemente el "botón de activación de calefacción" (9) para encender la función de calefacción, y luego presione brevemente para cambiar a diferentes velocidades: 1-2-3-apagado, correspondiente a una temperatura de 35-40-45 (± 2) ° C. En este momento, la luz indicadora roja en el cabezal de masaje de enfriamiento/calentamiento se enciende; También puede mantener presionada la "Tecla de activación del masajeador" (6) para activar la función de masaje al mismo tiempo.

Enfriamiento: Presione brevemente el "botón de activación de enfriamiento" (4) para encender la función de enfriamiento, y luego presione brevemente para cambiar a diferentes velocidades: 1-2-3-apagado, correspondiente a una temperatura de 10-15-20 (± 6) ° C. En este momento, la luz indicadora azul en el cabezal de masaje de enfriamiento/calor se enciende; También puede mantener presionada la "Tecla de activación del masajeador" (6) para activar la función de masaje al mismo tiempo.

Modo de carga:

Conecte un extremo del cable de carga USB-C equipado al puerto de carga del dispositivo e inserte el otro extremo del puerto USB en el puerto USB del cargador para cargar el dispositivo. Si el dispositivo está encendido, se apagará automáticamente después de conectar el cargador. La luz indicadora roja parpadea lentamente durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada. (Para una carga más rápida, se recomienda utilizar un adaptador de 5V/2A para cargar, y este dispositivo no admite la función de carga durante el uso).

Cabezales de fijación de izquierda a derecha



Cabezal suave	Adecuado para grupos musculares
Cabezal de horquilla	Adecuado para la columna
Cabezal de alfiler	Adecuado para partes cercanas a las articulaciones y estimulación profunda
Cabezal plana	Adecuado para grandes áreas musculares

Instalación de los accesorios

Instale y reemplace el cabezal de masaje según sea necesario. Para hacer esto, simplemente retire el accesorio e inserte el accesorio deseado en el orificio redondo cónico del masajeador. El cabezal del masajeador frío/calor tiene un enchufe que debe estar alineado con el enchufe del masajeador.

Instrucciones de seguridad

- La función Caliente/Frío puede provocar irritación de la piel. Si esto ocurre, interrumpa el tratamiento inmediatamente.
- Cargue la unidad únicamente con el cable de carga USB suministrado.
- Este aparato no está destinado a niños o personas con capacidad mental reducida o falta de experiencia y/o conocimientos.
- Este aparato no está diseñado para uso comercial.
- Cualquier otro uso o modificación del aparato se considera inadecuado y entraña riesgos considerables. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.
- Nunca deje el Lifenaxx LX-041 desatendido cuando esté en modo de funcionamiento o durante la carga.

POR FAVOR NO UTILICE EL LIFENAXX LX-041 EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE SU MÉDICO:

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño a la retina, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migraña, hernia de disco, espondilolistesis, espondilólisis o espondilosis, cirugía reciente de reemplazo de articulaciones o DIU, clavos o placas de metal o si tiene

alguna inquietud sobre su salud física. Estas contraindicaciones no significan que no se pueda utilizar una máquina de vibración o ejercicio. Sin embargo, le recomendamos que consulte primero a un médico. Actualmente se están investigando los efectos del uso de vibraciones en determinadas afecciones médicas. Esto probablemente dará lugar a una reducción de la lista de contraindicaciones indicada. La práctica ha demostrado que en muchos casos es aconsejable integrar aplicaciones de vibración en un plan de tratamiento. Esto debe hacerse por recomendación y con la orientación de un médico, especialista o fisioterapeuta.

Advertencias y precauciones

- No utilice el dispositivo con equipos de soporte vital si una falla del dispositivo puede provocar fallas en el equipo de soporte vital o una reducción significativa de la seguridad o efectividad.
- No utilice el dispositivo en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso, ni cerca de sustancias, vapores o gases inflamables.
- No opere la unidad cerca de rejillas de calefacción o bajo la luz solar directa.
- Mantenga el dispositivo seco. No está protegido contra el agua.
- Apáguelo cuando no esté en uso.

Apoyo

Número de teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5 p. m.

Declaración de conformidad



La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación.

Deseche la caja y el cartón en el contenedor de papel usado. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.



Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que ya no se pueden usar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recolección en su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los dispositivos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



¡Las pilas y acumuladores no se deben tirar a la basura doméstica! Como consumidor, usted está obligado por ley a deshacerse de todas las pilas y baterías recargables, contengan sustancias perjudiciales* o no, en un punto de recogida en su municipalidad/ciudad o en un minorista, para garantizar que las pilas se puedan desechar de forma respetuosa con el medio ambiente. * marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelva su producto a su punto de recogida con la batería completamente descargada instalada en su interior!

Hecho en China

DISTRIBUIDO por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania