

# Technaxx® \* Instrukcja obsługi

## Lifenaxx Masażer szyi LX-046

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj ostrożnie niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub dzielenia się produktem. To samo zrób z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.

**Ciesz się swoim produktem. \* Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.**

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia – pamiętaj o korzystaniu z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

## **Spis treści**

Poradnik .....	2	Ładowanie .....	6
Instrukcje bezpieczeństwa .....	2	Włącz /wyłącz urządzenie ...	6
Zasady bezpieczeństwa		Specyfikacja techniczna .....	6
dotyczące akumulatorów .....	4	Wsparcie .....	6
Ostrzeżenia .....	4	Opieka i utrzymanie.....	7
Zastrzeżenie .....	4	Deklaracja zgodności .....	7
Cechy .....	4	Sprzedaż .....	7
Przeгляд produktów.....	6		

## **Poradnik**

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Wypadki (w tym ciecze lub wilgoć), niewłaściwe lub nadużycie użytkownika produktu, owady, manipulowanie lub modyfikacje produktu przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy, narażenie na wyjątkowo żrące materiały, wkładanie ciał obcych do urządzenia, używanego z niezatwierdzonymi akcesoriami.

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i przestrzegaj ich. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Jeśli kabel przyłączeniowy tego urządzenia jest uszkodzony, należy go wyrzucić. Jeśli nie da się go usunąć, urządzenie należy wyrzucić. Urządzenie ma gorącą powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie kładź żadnych przedmiotów na kablu, gdyż może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza gniazd i wtyczek.
- Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel mógłby się zepsuć.

- Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy ani innego okablowania, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie używaj płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.
- Nie należy używać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w miejscach, w których temperatura może przez dłuższy czas przekraczać 50°C.
- Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

### **Nie używaj masażera:**

- na zwierzętach
- jeśli cierpisz na nieprawidłowości zdrowotne lub uraz w obszarze masowanym (np. przepuklina dysku, otwarte rany)
- pod żadnym pozorem masażu okolic serca, jeśli nosisz rozrusznik serca – i skonsultuj się z lekarzem w sprawie innych części ciała
- na opuchniętą, poparzoną, zapalną lub uszkodzoną skórę i wszelkiego rodzaju części ciała
- na skaleczenia, naczynka, żylaki, trądzik, naczynka, opryszczkę i inne choroby skóry
- na głowie lub na twardych częściach ciała (np. kościach i stawach)
- podczas ciąży
- na twarzy (oczach), krtani lub innych szczególnie wrażliwych częściach ciała
- do masażu stóp
- podczas spania
- po spożyciu leków lub alkoholu (ograniczone funkcje poznawcze!)
- na skórę nałożony wcześniej krem (np. maść rozgrzewająca),
- w pojazdach.

### **Przed użyciem masażera skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza:**

- jeśli cierpisz na ciężką chorobę lub niedawno przeszedłeś operację górnej części ciała
- jeśli masz rozrusznik serca, implanty lub inne urządzenia pomocnicze
- jeśli u pacjenta występuje zakrzepica
- jeśli cierpisz na cukrzycę
- jeśli odczuwasz ból z nieznanego przyczyny

## Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt wykorzystuje akumulatory i można go zabrać wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz. Jednak **WSZYSTKIE** akumulatory mogą **WYBUCHAĆ, ZAPŁONIC SIĘ I SPOWODOWAĆ POPARZENIA** w przypadku demontażu, przekłucia, przecięcia, zgniecenia, zwarcia, spalenia lub wystawienia na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- **NIGDY** nie pozwól, aby akumulator lub komora baterii uległy zamoczeniu.
- **NIGDY** nie demontuj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie zwieraj baterii, nie wrzucaj ich do ognia lub wody ani nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

## Ostrzeżenia

- Nie demontuj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Żywotność baterii zmniejsza się wraz z użytkowaniem. Ładuj baterię co najmniej raz w miesiącu, aby zachować baterię w przypadku, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia akumulator może eksplodować.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa.
- Do czyszczenia nie należy używać żrących lub lotnych cieczy.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.
- Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

## Zastrzeżenie

- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne zagrożenia następcze dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, jakiegokolwiek skutki lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich produktów.

## Cechy

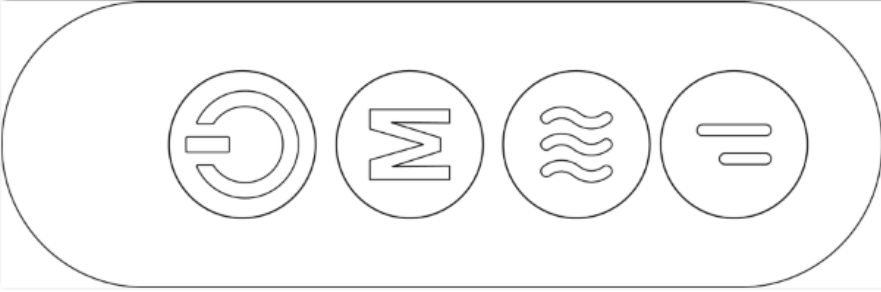




- Masażer z łatwością dopasowuje się do różnych partii ciała.
- Kojące ciepło można wyłączyć.
- Sam ustalasz intensywność i przebieg masażu.
- Dzięki 2 różnym trybom i 2 różnym regulowanym prędkościom poprawia samopoczucie, łagodzi ból, ból mięśni, skurcze i napięcie mięśni.

●Masażer nadaje się do stosowania na szyi, ramionach, plecach, talii, brzuchu, ramionach i nogach.

●2 tryby

●2 różne prędkości

## Przegląd produktów

Panel sterowania			
			
	Przełącznik włącz / wyłącz		Program
	Ciepło (czerwona dioda LED -> włączona, zielona dioda LED -> wyłączona)		Prędkość

### Ładowanie

● Podłącz kabel USB-C urządzenia do adaptera USB\* (\*nie wchodzi w skład zestawu).

**Uwaga:** pierwsze ładowanie trwa około 3 godzin, CZERWONA dioda LED miga tak długo, jak długo ładowany jest przedmiot.

### Włącz /wyłącz urządzenie

Umieść masażer w wybranym miejscu na ciele

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się na czerwono

### Specyfikacja techniczna

Pojemność baterii	2000 mAh 7,4 V
Moc znamionowa	10 W
Możliwość pracy bezprzewodowej, z kablem USB i portem ładowania typu C	Nie ma zastosowania podczas ładowania
Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 minutach	
Ogrzewanie wewnątrz można wyłączyć.	

### Wsparcie

Numer telefonu serwisowego pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minutę z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia wsparcia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

## Opieka i utrzymanie

Urządzenie czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych.

To urządzenie jest precyzyjnym przyrządem optycznym, dlatego aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używaj urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Dostarcz lub użyj go w mocno szokującym środowisku.

## Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod adresem: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

## Sprzedaż



Utylizacja opakowania. Po wyrzuceniu sortuj materiały opakowaniowe według rodzaju.

Karton i tekturę wyrzucaj do makulatury. Folie należy oddać do zbiórki surowców wtórnych.



Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, gdzie obowiązuje selektywna zbiórka (zbieranie surowców wtórnych) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń, których nie można już utylizować używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki na terenie swojej gminy lub dzielnicy. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone pokazanym symbolem Tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych! Jako konsument masz prawny obowiązek utylizacji wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe\*, czy nie, w punkcie zbiórki w Twojej gminie/mieście lub u sprzedawcy, aby mieć pewność, że baterie będą mogły zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla

środowiska. \* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.  
Zwróć produkt do punktu zbiórki z zamontowaną w środku  
całkowicie rozładowaną baterią!



Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Niemcy

Masażer szyi LX-046