

## **Lifenaxx LX-046**

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.



Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. . Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este dispositivo.

Guarde cuidadosamente este manual del usuario para consultarlo en el futuro o compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, comuníquese con el distribuidor o la tienda donde compró este producto .

## **Disfrute de su producto. \* Comparte tu experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; asegúrese de utilizar el manual más reciente disponible en el sitio web del fabricante.

### **Tabla de contenido**

Consejos .....	2	Cargando .....	6
Instrucciones de seguridad .....	2	Encender /Apagar el dispositivo .....	6
Normas de seguridad para baterías recargables.....	4	Especificaciones técnicas .....	6
Advertencias.....	4	Apoyo .....	6
Descargo de responsabilidad.....	4	Cuidado y mantenimiento.....	7
Características .....	4	Declaración de conformidad.....	7
Descripción del producto .....	6	Desecho .....	7

### **Consejos**

Utilice el producto únicamente para los fines previstos para su función. No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañar el producto: Accidentes (incluidos líquidos o humedad), uso inadecuado o abuso del producto, insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado, exposición a materiales anormalmente corrosivos, inserción de objetos extraños en la unidad, utilizada con accesorios no preaprobados.

Lea y observe todas las advertencias y precauciones en las instrucciones de funcionamiento. Consulte y preste atención a todas las advertencias y precauciones del manual del usuario. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Si el cable de conexión a la red de este dispositivo está dañado, debe desecharse. Si no se puede retirar, se debe desechar el dispositivo. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el dispositivo.

### **Instrucciones de seguridad**

- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El cable está enfundado y aísla la corriente. No coloque ningún objeto sobre el cable, ya que podría perder la función protectora. Evite ejercer una tensión excesiva sobre el cable, especialmente en las tomas y enchufes.
- Si desea desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe y no del cable. De lo contrario, el cable podría romperse.

- No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de extensión u otros cables, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza. El producto sólo se puede limpiar con un paño húmedo.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50°C durante mucho tiempo.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de asfixia.

### **No utilice el masajeador:**

- en animales
- si sufre una anomalía médica o una lesión en la zona a masajear (por ejemplo, hernia de disco, heridas abiertas)
- bajo ninguna circunstancia para masajes en el área alrededor del corazón si lleva un marcapasos – y consulte a su médico sobre otras partes del cuerpo
- en piel y partes del cuerpo hinchadas, quemadas, inflamadas o dañadas de cualquier tipo
- en cortes, capilares, venas varicosas, acné, cuperosis , herpes u otras enfermedades de la piel
- en la cabeza o en partes duras del cuerpo (por ejemplo, huesos y articulaciones)
- durante el embarazo
- en la cara (ojos), en la laringe u otras partes del cuerpo particularmente sensibles
- para masajes de pies
- Mientras duerme
- después del consumo de medicamentos o alcohol (¡cognición reducida!)
- sobre la piel con crema previamente aplicada (por ejemplo, ungüento caliente),
- en vehículos.

### **Consulte a su médico antes de utilizar el masajeador, especialmente:**

- si padece una enfermedad grave o ha tenido recientemente una cirugía en la parte superior del cuerpo
- si tiene un marcapasos, implantes u otras ayudas
- si sufre de trombosis
- si sufre de diabetes
- si sufre dolor por causas desconocidas

## **Normas de seguridad para baterías recargables.**

El producto utiliza baterías recargables y puede ir a donde las necesite. Pero TODAS las baterías pueden EXPLOTAR, INCENDIARSE y CAUSAR QUEMADURAS si se desmontan, se perforan, se cortan, se aplastan, se cortocircuitan, se incineran o se exponen al agua, el fuego o las altas temperaturas, por lo que debe manipularlas con cuidado.

Para utilizar las baterías recargables de forma segura, siga estas pautas:

●NUNCA deje que la batería recargable o el compartimiento de la batería se mojen.

●NUNCA desmonte, corte, aplaste, perforo, cortocircuite, arroje las baterías al fuego o al agua, ni exponga la batería recargable a temperaturas superiores a 50 °C.

## **Advertencias**

●No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños. ●La vida útil de la batería disminuirá con el uso. Cargue la batería al menos una vez al mes para conservarla en caso de que el producto no se utilice durante un período prolongado. ●Advertencia sobre la batería: el uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar en caso de daño. ●No lo modifique, repare ni elimine sin orientación profesional. ●No utilice líquidos corrosivos o volátiles para la limpieza. ●No deje caer ni agite el dispositivo, podría romper las placas de circuitos internos o la mecánica. ●Mantenga el dispositivo alejado de los niños pequeños.

## **Descargo de responsabilidad**

● En ningún caso Technaxx Deutschland será responsable de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental o consecuente especial para la propiedad o la vida, almacenamiento inadecuado, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

## **Características**

●El masajeador se adapta fácilmente a diferentes partes del cuerpo.

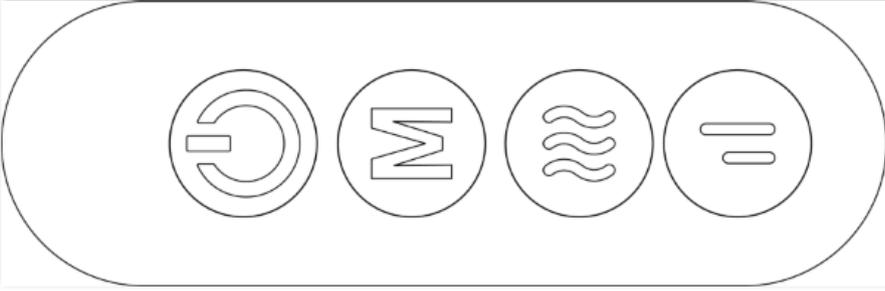
●El calor relajante se puede apagar.

●Usted mismo determina la intensidad y el curso del masaje.

●Con 2 modos diferentes y 2 velocidades diferentes ajustables, aumenta el bienestar, alivia el dolor, los dolores musculares, los calambres y la tensión muscular.

- El masajeador es adecuado para usar en cuello, hombros, espalda, cintura, abdomen, brazos y piernas.
- 2 modos
- 2 velocidades diferentes

## Descripción del producto

Panel de control			
			
	Interruptor encendido / apagado		Programa
	Calor (LED rojo ->encendido, LED verde -> apagado)		Velocidad

## Cargando

● Conecte el cable USB-C del dispositivo a un adaptador USB\* (\*no incluido).

**Nota:** La primera carga tarda aproximadamente 3 horas, el LED ROJO parpadea mientras se carga el artículo.

## Encender /Apagar el dispositivo

Coloque el masajeador en el lugar elegido de su cuerpo.

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que se ilumine en rojo

## Especificaciones técnicas

Capacidad de la batería	2000 mAh 7,4 V.
Potencia nominal	10W
Uso inalámbrico, con cable USB y puerto de carga tipo C	Sin uso durante la carga
Función de apagado automático después de 10 minutos.	
La calefacción interior se puede apagar.	

## Apoyo

Número de teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5 p. m.

## Cuidado y mantenimiento

Limpie el dispositivo únicamente con un paño sin pelusa, seco o ligeramente húmedo.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Este dispositivo es un instrumento óptico de alta precisión, por lo que para evitar daños, evite las siguientes prácticas:

- Utilice el dispositivo a temperaturas ultraaltas o ultrabajas.
- Entregarlo o utilizarlo en un ambiente fuertemente impactante.

## Declaración de conformidad



La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

## Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación.

Deseche el cartón y el cartón en el contenedor de papel usado. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.



Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables). ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que ya no se pueden desechar. Se utiliza por separado de los residuos domésticos, por ejemplo en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos antiguos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra. aquí.



¡Las pilas y acumuladores no se deben tirar a la basura doméstica! Como consumidor, usted está obligado por ley a deshacerse de todas las pilas y baterías recargables, contengan sustancias nocivas\* o no, en un punto de recogida en su comunidad/ciudad o en un minorista, para garantizar que las pilas se puedan desechar. de forma respetuosa con el medio

ambiente. \* marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelve tu producto a tu punto de recogida con la batería completamente descargada instalada en su interior!

Hecho en china

DISTRIBUIDO por:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Alemania

Masajeador de cuello LX-046