

## **Lifenaxx Masážní přístroj na krk LX-046**

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. . Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

## **Užijte si svůj produkt. \* Podělte se o své zkušenosti a názor na některém ze známých internetových portálů.**

Specifikace se mohou bez upozornění změnit – používejte prosím nejnovější návod dostupný na webu výrobce.

### **Obsah**

Rady .....	2	Nabíjení .....	5
Bezpečnostní instrukce .....	2	Zapnutí /vypnutí zařízení.....	5
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie .....	3	Technické specifikace .....	5
Varování .....	4	Podpěra, podpora.....	5
Zřeknutí se odpovědnosti .....	4	Péče a údržba .....	6
Funkce.....	4	Prohlášení o shodě .....	6
Přehled produktů .....	5	Likvidace .....	6

### **Rady**

Výrobek používejte pouze k účelům, pro které je určen. Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou poškodit produkt: Nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné nebo zneužití produktu, hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisním personálem, vystavení abnormálně korozivním materiálům, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s neschváleným příslušenstvím.

Přečtěte si a dodržujte všechna varování a upozornění v návodu k obsluze. Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v uživatelské příručce. Děti si se zařízením nesmí hrát. Pokud je napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, musí být zlikvidován. Pokud jej nelze odstranit, je nutné zařízení zlikvidovat. Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání přístroje opatrné.

### **Bezpečnostní instrukce**

- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku a ne za kabel. Kabel by se jinak mohl zlomit.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo jiné kabely, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek lze čistit pouze vlhkým hadříkem.
- Výrobek nepoužívejte na přímém slunci nebo na místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50°C.
- Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

### **Nepoužívejte masér:**

- na zvířatech
- jestliže trpíte zdravotní abnormalitou nebo zraněním v oblasti, která má být masírována (např. vyhřezlá ploténka, otevřené rány)
- za žádných okolností na masáži v oblasti kolem srdce, pokud máte kardiostimulátor – a ohledně jiných částí těla se poraďte se svým lékařem
- na oteklou, popálenou, zanícenou nebo poškozenou kůži a části těla jakéhokoli druhu
- na řezné rány, kapiláry, křečové žíly, akné, kuperózu, herpes nebo jiná kožní onemocnění
- na hlavě nebo na tvrdých částech těla (např. kosti a klouby)
- během těhotenství
- na obličeji (oči), na hrtanu nebo jiných zvláště citlivých částech těla
- pro masáže nohou
- během spánku
- po požití léků nebo alkoholu (snížená kognice!)
- na kůži dříve naneseným krémem (např. hřejivou mastí),
- ve vozidlech.

### **Před použitím masážního přístroje se poraďte se svým lékařem, zejména:**

- jestliže trpíte závažným onemocněním nebo jste nedávno podstoupili operaci horní části těla
- pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomůcky
- jestliže trpíte trombózou
- jestliže trpíte cukrovkou
- jestliže trpíte bolestí z neznámých příčin

### **Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie**

Výrobek používá dobíjecí baterie a může jít, kamkoli je potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou EXPLODOVAT, VZNÍTAT SE A ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, proraženy, rozříznuty,

rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni nebo vysokým teplotám, takže s nimi musíte zacházet opatrně.

Chcete-li nabíjecí baterie používat bezpečně, dodržujte tyto pokyny:

- NIKDY nenechte dobíjecí baterii nebo přihrádku na baterie zvlhnout.
- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně nebo vody a nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

## **Varování**

- Výrobek nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Životnost baterie se používáním snižuje. Baterii nabijte alespoň jednou za měsíc, abyste šetřili baterii v případě, že produkt nebudete delší dobu používat.
- Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny.
- Zařízení neupust'te ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky.
- Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.

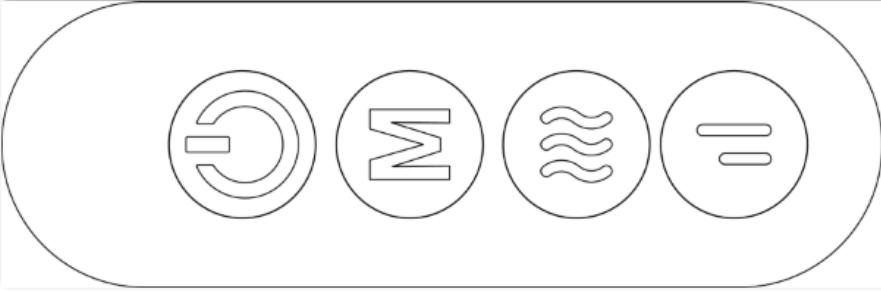




## **Zřeknutí se odpovědnosti**

- Společnost Technaxx Deutschland nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo životy, nesprávné skladování, ať už vyplývá nebo souvisí s použitím nebo nesprávným použitím jejich produktů.

## **Funkce**

- Masér se snadno přizpůsobí různým částem těla.
- Uklidňující teplo lze vypnout.
- Intenzitu a průběh masáže si určujete sami.
- Se 2 různými režimy a 2 různými nastavitelnými rychlostmi zvyšuje pohodu, zmírňuje bolest, bolavé svaly, křeče a svalové napětí.
- Masážní přístroj je vhodný pro použití na krk, ramena, záda, pas, břicho, ruce a nohy.
- 2 režimy
- 2 různé rychlosti

## Přehled produktů

Kontrolní panel			
			
	Vypínač zapnuto/vypnuto		Program
	Teplo (LED červená ->svítí, LED zelená -> nesvítí		Rychlost

### Nabíjení

●Připojte kabel USB-C na zařízení k adaptéru USB\* (\*není součástí dodávky).

**Poznámka:** První nabíjení trvá asi 3 hodiny, ČERVENÁ LED bliká tak dlouho, dokud se položka nabíjí.

### Zapnutí /vypnutí zařízení

Umístěte masážní přístroj na zvolené místo na těle

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí červeně

## Technické specifikace

Kapacita baterie	2000mAh 7,4V
Jmenovitý výkon	10W
Bezdrátové použití, s USB kabelem a nabíjecím portem Type-C	Během nabíjení se nepoužívá
Funkce automatického vypnutí po 10 minutách	
Topení uvnitř šlo vypnout.	

### Podpěra, podpora

Servisní telefon pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí). E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00

## Péče a údržba

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Toto zařízení je vysoce přesný optický přístroj, takže aby nedošlo k poškození, vyhněte se následujícímu postupu:

- Používejte zařízení při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.
- Dodávejte nebo používejte jej v silně šokujícím prostředí.

## Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

## Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci rozřídte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě v jeho obci nebo okrese Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem tady.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky\* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/měště nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. \* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribuvány:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck , Německo

Masážní stroj na krk LX-046