

Lifenaxx® *Manuale di istruzioni

Micro massaggiatore portatile LX-039

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e le istruzioni di sicurezza.



Si prega di conservare questo manuale al sicuro per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia ti invitiamo a contattare il rivenditore o il negozio dove hai acquistato il prodotto.

Goditi il tuo prodotto. * Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei noti portali Internet.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso: assicurati di utilizzare il manuale più recente disponibile sul nostro sito Web.

Caratteristiche

LifenaXX LX-039 è un massaggiatore a vibrazione wireless che rilassa i muscoli doloranti e rigidi, aumenta il flusso sanguigno e migliora la salute generale dei muscoli del corpo.

- Velocità fino a 32,00 giri/min .
- Batteria da 7,4 V con 2000 mAh, tempo di ricarica di circa 2 ore
- Durata della batteria di circa 120 minuti
- 4 diversi adattatori per il massaggio
- Indicatore della batteria


Dati tecnici

Porta USB	USB-C con 5 V, massimo 3 A
Batteria	7,4 V, 2000 mAh
Prestazione	25W
Velocità	Massimo 3200 giri/min
Durata	Circa 2 ore
Tempo di caricamento	Circa 2 ore
Tipo di motore	Motore a spazzole
Materiale	Plastica ABS
Accessori	Micro massaggiatore portatile LX-039, 4 adattatori per il messaggio, cavo di ricarica, manuale di istruzioni

Utilizzo

● Indicatore luminoso di carica: l'indicatore luminoso blu lampeggia lentamente durante la ricarica. Tutte le spie si accendono quando la batteria é carica. ● Inserisci 1 dei 4 adattori in base alle tue esigenze. ● Premere il pulsante di avvio/arresto per accendere/spegnere il dispositivo. ● Installa uno dei 4 adattatori in base alle tue esigenze. ● Utilizzare solo sopra gli indumenti, su una superficie corporea asciutta e pulita, muovendo il dispositivo con una leggera pressione per circa 60 secondi su ogni zona del corpo. ● Utilizzare il massaggiatore solo sui muscoli del corpo così da evitare dolori. Non utilizzare sulla testa o su zone dure (ossa) del corpo. ● Gli ematomi possono verificarsi indipendentemente dalla pressione applicata. Controlla frequentemente le aree trattate e fermati immediatamente se noti segni di dolore o fastidio. ● Tenere le dita, i capelli o altre parti del corpo lontano dal fusto e dal retro dell'applicatore poiché ciò potrebbe causare lividi .

Panoramica del prodotto

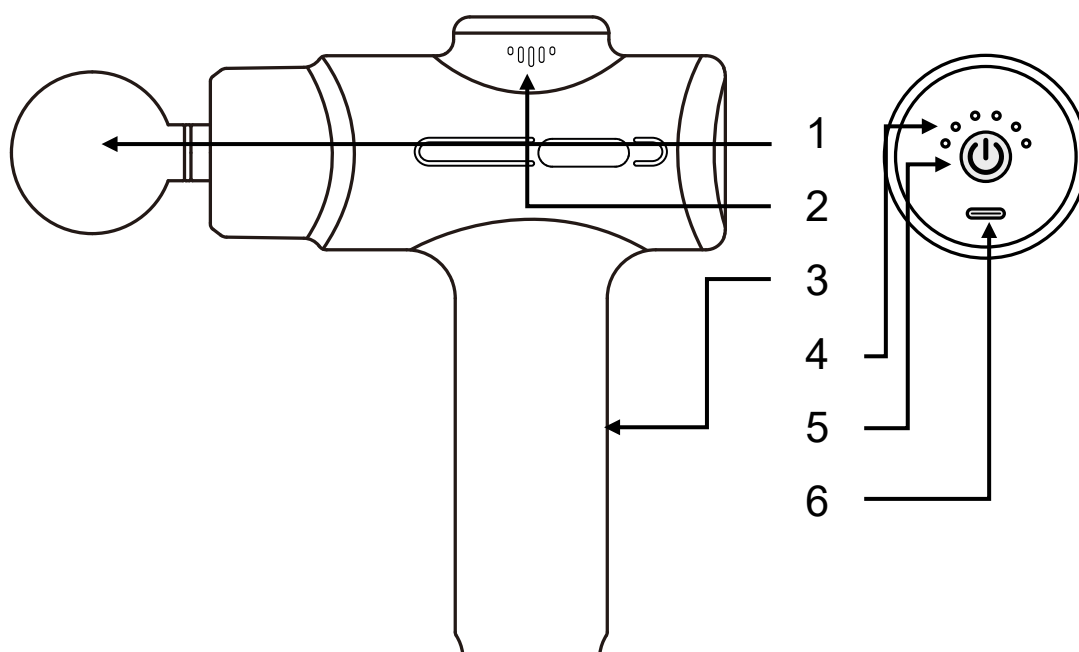

1	Foro per gli adattori	4	Indicatore LED della batteria
2	Uscita dell'aria	5	Pulsante avvio/arresto
3	Impugnatura	6	Porta di ricarica USB tipo C

Adattatori inclusi



Adattatore a forcella	a	adatto per la zona della colonna vertebrale
Adattatore a punta		adatto per le zone vicine alle articolazioni e per la stimolazione profonda
Adattatore piatto		adatto per grandi gruppi muscolari
Adattatore rotondo		adatto per gruppi muscolari

Installazione degli adattatori

Installare e sostituire gli adattatori per il massaggio in base ai muscoli che si vogliono massaggiare. Per fare ciò è sufficiente rimuovere l'adattatore e inserire quello desiderato nel foro rotondo situato nel massaggiatore.

Istruzioni di sicurezza

- Caricare il dispositivo solo con il cavo di ricarica USB in dotazione.
- Questo prodotto non è destinato a bambini o persone con capacità mentali ridotte o con mancanza di esperienza e/o competenza.
- Qualsiasi altro utilizzo o modifica del dispositivo è considerato improprio e comporta rischi significativi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.
- NON lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento o la ricarica.

SI PREGA DI NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE (SI CONSIGLIA DI CONSULTARE UN MEDICO):

Gravidanza, diabete con complicazioni quali neuropatia o danno retinico, uso di pacemaker, interventi chirurgici recenti, epilessia o emicrania, ernia del disco, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, recenti procedure o bobine di sostituzione articolare, perni o placche metalliche o qualsiasi dubbio relativo alle condizioni fisiche salute. Queste controindicazioni non significano che non sia possibile utilizzare una macchina vibrante o ginnica. Tuttavia, ti consigliamo di consultare prima un medico. Attualmente si stanno studiando gli effetti delle applicazioni delle vibrazioni su determinate patologie mediche. La pratica ha dimostrato che in molti casi è consigliabile usare il prodotto da sdraiati. Questa operazione deve essere effettuata su indicazione e con l'assistenza di un medico, specialista o fisioterapista.

Avvertenze

- Non utilizzare il dispositivo con apparecchiature di supporto vitale se il guasto del dispositivo potrebbe comportare il guasto del sistema di supporto vitale o una significativa riduzione della sicurezza o dell'efficacia.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di una miscela anestetica infiammabile contenente aria, ossigeno o protossido di azoto o in prossimità di sostanze, vapori o gas infiammabili.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a bocchette di riscaldamento o alla luce solare diretta.
- Mantenere il dispositivo asciutto e spegnerlo quando non in uso.

Supporto

Numero telefonico per assistenza tecnica: 01805 012643 (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

E-Mail gratuita: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00!

Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo www.technaxx.de/ (nella barra in basso "Dichiarazione di conformità").

Disposizione



Smaltimento degli imballaggi. Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia.

Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. Film per la raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltire i vecchi apparecchi (Vale nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili)) I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi apparecchi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto, oppure a consegnarli gratuitamente ai rivenditori. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano correttamente riciclati e che si evitino impatti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Come consumatore sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e gli accumulatori, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, in un punto di raccolta nel tuo comune/città o nei negozi gratuitamente affinché possano essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

(* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.)

Rimuovere tutte le batterie prima della consegna. Restituisci il tuo prodotto con la batteria installata e solo scarico al tuo punto di raccolta!

Ulteriori informazioni sulla legge sulla batteria si trovano anche in Internet all'indirizzo www.batteriegesetz.de.

Made in China

Distribuito da:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anello Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Germania