

Lifenaxx® * Gebrauchsanleitung

Mikro Massagegerät LX-039

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das Sie auf der Website des Herstellers finden.

Besonderheiten

Das LifenaXX LX-039 ist ein kabelloses Vibrationsmassagegerät, das schmerzende, steife Muskeln entspannt, die Durchblutung und den Bewegungsumfang erhöht und die allgemeine Gesundheit des Weichteilgewebes des Körpers verbessert.

- Geschwindigkeit bis zu 3200U/min.
- 7,4V Volt Batterie mit 2000mAh ca. 2 Stunden Ladezeit
- 120 Min. Betriebszeit
- 4 verschiedene Massageköpfe
- Batterieanzeige


Technische Daten

USB-Anschluss	USB-C mit 5V, max. 3A
Batterie	7,4V, 2000mAh
Leistung	25W
Drehzahl	Max. 3200U/min
Laufzeit	Ca. 2 Stunden
Ladezeit	Ca. 2 Stunden
Motortyp	Bürstenmotor
Material	ABS-Kunststoff
Zubehör	LX-039 Mikro Massagegerät, 4x Massageaufsätze, Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Gebrauch

● Ladekontrollleuchte: Die blaue Anzeigelampe blinkt beim Aufladen langsam. Alle Anzeigelampen leuchten, wenn sie voll ist. ● Installieren Sie 1 der 4 Köpfe entsprechend Ihren Bedürfnissen. ● Drücken Sie den Start/Stop-Taster, um das Gerät ein-/auszuschalten. ● Installieren Sie einen der 4 Köpfe entsprechend Ihren Anforderungen. ● Nur über der Kleidung, auf trockener, sauberer Körperfläche benutzen, indem Sie das Gerät mit leichtem Druck für ungefähr 60 Sekunden pro Körperregion bewegen. ● Verwenden Sie den Lifenaxx LX-039 nur auf dem Weichgewebe des Körpers, je nach Bedarf, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder auf harten oder knöchernen Körperstellen anwenden. ● Verwenden Sie nur die Applikatoren, die den bestmöglichen Effekt erzielen. ● Hämatome können, unabhängig von dem angewendeten Druck, auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen häufig und hören Sie sofort auf, wenn Sie erste Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden bemerken. ● Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da dies zu Quetschungen führen kann.

Produktübersicht

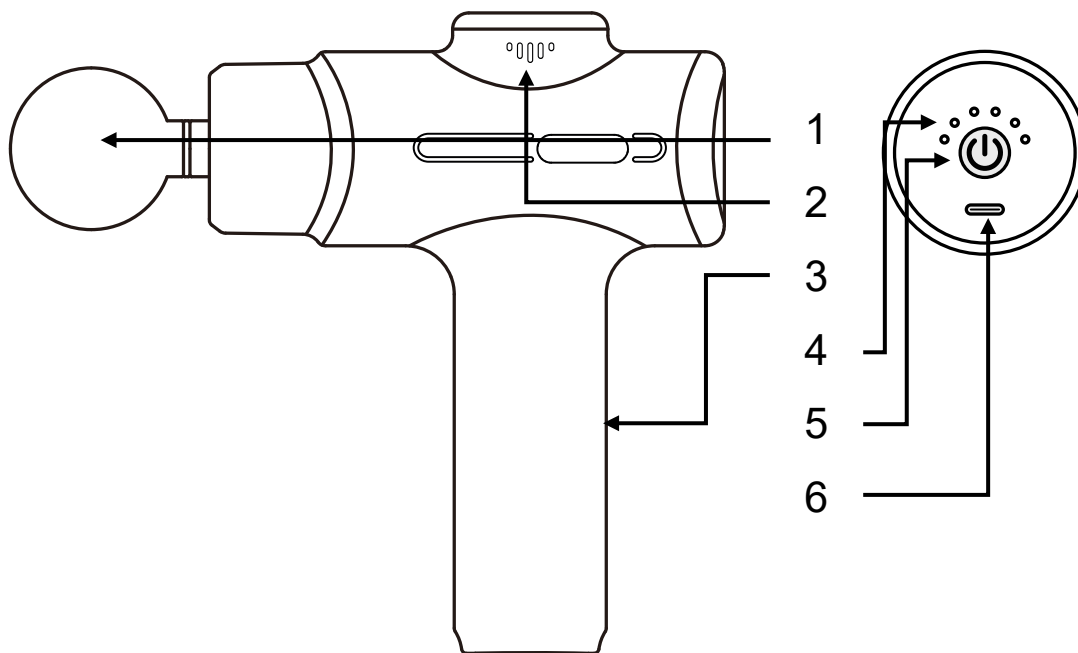

1	Massagekopf	4	Batterie LED-Anzeige
2	Luftauslass	5	Start/Stopp-Taster
3	Handgriff	6	USB Typ-C Ladeanschluss

Aufsätze von links nach rechts



Gabelkopf	geeignet für die Wirbelsäulenpartie
Stiftkopf	geeignet für gelenknahe Partien und Tiefenstimulation
Flacher Kopf	geeignet für große Muskelpartien
Weich Kopf	geeignet für Muskelgruppen

Installieren der Aufsätze

Installieren und tauschen Sie den Massagekopf je nach Bedarf. Ziehen Sie dazu den Aufsatz einfach ab und stecken Sie den gewünschten Aufsatz in das konisch zulaufende runde Loch des Massagegeräts.

Sicherheitshinweise

→ Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf.

→ Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkter geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelnder Sachkenntnis bestimmt.

→ Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

→ Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Risiken. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

→ Lassen Sie den Lifenaxx LX-039 im Betriebszustand oder beim Laden niemals unbeaufsichtigt.

BITTE VERWENDEN SIE DEN LIFENAXX LX-039 BEI FOLGENDEN UMSTÄNDEN NICHT OHNE VORHERIGE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschädigung, Tragen von Herzschrittmachern, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzeingriffe oder Spiralen, Metallstifte oder -platten oder bei irgendwelchen Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie kein Vibrations- oder Trainingsgerät verwenden können. Wir empfehlen Ihnen jedoch, zuerst einen Arzt aufzusuchen. Die Auswirkungen von Vibrationsanwendungen auf bestimmte medizinische Erkrankungen werden derzeit untersucht. Dies wird wahrscheinlich zu einer Verkürzung der angeführten Liste der Kontraindikationen führen. Die Praxis hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationsanwendungen in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen ratsam ist. Dies muss auf Empfehlung und mit Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten erfolgen.

Warnhinweise

● Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit lebenserhaltenden Einrichtungen, wenn ein Ausfall des Geräts zum Ausfall der lebenserhaltenden Einrichtung oder erheblichen Einschränkung der Sicherheit oder Wirksamkeit führen kann. ● Verwenden Sie das Gerät nicht in Gegenwart eines entflammbar-narkosemittelgemisches mit Luft, Sauerstoff oder Lachgas und auch nicht in der Nähe von entflammbar-n Stoffen, Dämpfen oder Gasen. ● Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizöffnungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung. ● Halten Sie das Gerät trocken und schalten Sie es aus, wenn es nicht benötigt wird.

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.



Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder unentgeltlich im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.)

Entfernen Sie vor Abgabe alle Batterien. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland