

# Lifenaxx® \* Manuale utente

## Mini massaggiatore LX-025

La Dichiarazione di conformità di questo dispositivo è consultabile presso il sito web: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (nella barra inferiore "Konformitätserklärung") Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta leggere attentamente il manuale d'istruzioni. No. telefono di servizio per supporto tecnico: 01805 012643 (14 cent/minuto da linea fissa tedesca e di 42 cent/minuto da reti mobili). Email gratis: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Tenere a portata di mano il presente manuale per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali del prodotto. Per questioni inerenti la garanzia, rivolgersi al concessionario o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

**Garanzia di 2 anni**

### Caratteristiche

- LIFENAXX LX-025 è un dispositivo di massaggio a vibrazione senza fili che rilassa i muscoli doloranti, aumenta la circolazione e la gamma di movimenti e migliora la salute generale dei tessuti molli del corpo.
- 4 livelli di velocità con 1200, 1800, 2400, 2800 giri/min.
- Batteria da 7,4V Volt con 2000mAh
- 120 min di tempo di funzionamento
- 4 diverse testine massaggiatrici
- spegnimento automatico dopo 10 min.
- Indicatore di batteria scarica, il LED rosso e verde lampeggia

### Specifiche tecniche


USB (solo per uso interno)	5V max.0,8A
Batteria	7,4V, 2000mAh

## Uso normale

Solo per uso da parte di adulti.

- Indicatore luminoso di carica: La spia rossa lampeggia lentamente durante la carica, e la spia rossa si spegne quando è piena.
- Installare 1 delle 4 testine in base alle proprie esigenze.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere e spegnere l'oggetto.
- premere brevemente il pulsante per cambiare la velocità
- Installare 1 delle 4 testine in base alle proprie esigenze.
- Usare solo su una superficie asciutta e pulita del corpo sopra gli indumenti premendo leggermente e spostandosi sul corpo per circa 60 secondi per regione.
- Utilizzare Lifenaxx LX-025 solo sui tessuti molli del corpo, come desiderato, senza produrre dolore o fastidio. Non utilizzare sulla testa o su qualsiasi area dura o ossuta del corpo.
- Utilizzare solo gli applicatori che forniscono l'effetto desiderato.
- Possono verificarsi ecchimosi indipendentemente dall'impostazione del controllo o dalla pressione applicata. Controllare frequentemente le aree trattate e fermarsi immediatamente al primo segno di dolore o disagio.
- Tenere dita, capelli o qualsiasi altra parte del corpo lontana dall'albero e dalla parte posteriore dell'applicatore, poiché potrebbe verificarsi un pizzicamento.
- Non posizionare oggetti nei fori di ventilazione.

## Panoramica del prodotto

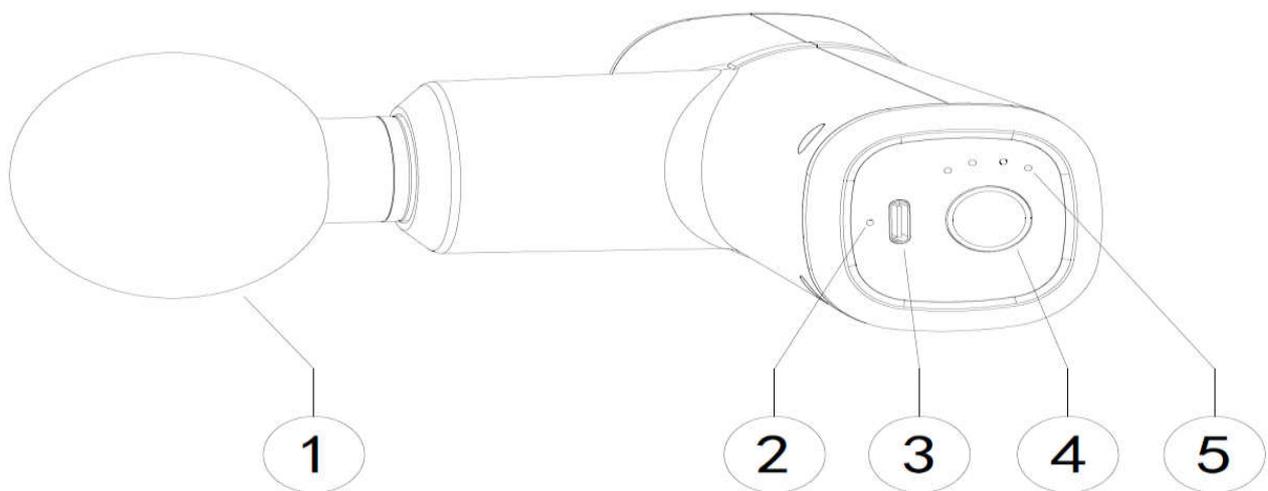

1	Testina di massaggio	4	Pulsante di potenza/velocità
2	Indicatore di lavoro e di carica	5	Indicazione della velocità
3	Porta di ricarica di tipo C		

## Testine da sinistra a destra



<b>Testina a forcella:</b>	adatta per posizione vertebrale
<b>Testina piatta:</b>	adatta a tutte le parti del corpo
<b>Testina a palla:</b>	adatta a gruppi muscolari
<b>Testina a proiettile:</b>	adatta per parti articolari del corpo

## Installare le testine

Installare e sostituire la testina di massaggio in base alle proprie esigenze, estrarre la testina originale (foto a sinistra) e inserire la testina di massaggio nel foro rotondo (foto a destra)



## Istruzioni di sicurezza

- Ricaricare solo con il cavo USB in dotazione o compatibile.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità mentali limitate o carenti di esperienza e/o carenti di competenza.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso commerciale.
- Qualsiasi altro uso o modifica del dispositivo è considerato improprio e comporta rischi significativi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.
- Non lasciare mai Lifenaxx LX-025 in funzione o in carica incustodito.


PER FAVORE, NON UTILIZZARE IL LIFENAXX LX-025, SENZA PREVIA APPROVAZIONE DEL MEDICO SE QUALUNQUE DELLE CONDIZIONI

## SEGUENTI È APPLICABILE:

Gravidanza, diabete con complicanze come neuropatia o danno alla retina, usura dei pacemaker, recente intervento chirurgico, epilessia o emicrania, ernia dei dischi, spondilolistesi, spondilolisi o spondilosi, recenti sostituzioni articolari o IUD, perni o piastre di metallo o qualsiasi preoccupazione relativa alla propria salute fisica. Queste controindicazioni non significano che non si è in grado di utilizzare un dispositivo di vibrazione o esercizio fisico, ma consigliamo di consultare prima un medico. Sono in corso ricerche sugli effetti dell'esercizio di vibrazione per specifici disturbi medici. Ciò comporterà probabilmente la riduzione dell'elenco delle controindicazioni mostrato sopra. L'esperienza pratica ha dimostrato che l'integrazione dell'esercizio di vibrazione in un piano di trattamento è suggerita in numerosi casi. Questo deve essere fatto su consiglio e in accompagnamento di un medico, specialista o fisioterapista

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

Solo per uso adulto, applicare su una superficie asciutta e pulita sopra gli indumenti con una leggera pressione e movimento sul corpo. Il tempo di applicazione non dovrebbe superare i 60 secondi per regione del corpo. Utilizzare LX-025 solo su tessuti molli e muscoli del corpo, se si avverte dolore o disagio interrompere la procedura. Utilizzare solo gli applicatori in dotazione. I punti di pressione possono verificarsi indipendentemente dall'impostazione, dal controllo o dalla pressione applicata. Controllare regolarmente le aree trattate e fermarsi immediatamente al primo segno di dolore o disagio. Tenere le dita, i capelli o altre parti del corpo lontano dal fuso e dalla parte posteriore dell'applicatore, poiché potrebbero verificarsi delle contusioni. Non azionare il dispositivo in prossimità di aperture di riscaldamento o alla luce diretta del sole. Tenere il dispositivo asciutto e spegnerlo quando non viene utilizzato. Non immergere il dispositivo in acqua. Frequenti stimolazioni ad alta velocità e ad alta pressione sullo stesso punto possono causare abrasioni. In caso di dolore o disagio, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio.

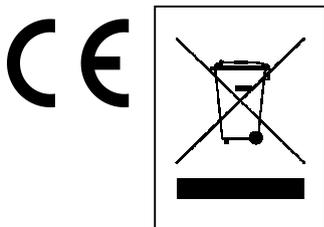

**Suggerimenti per la protezione dell'ambiente:** I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riciclati. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo dalla contaminazione e dall'inquinamento (usare un panno pulito). Evitare l'uso di materiali ruvidi, a grana grossa o solventi/detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania