

## Technaxx® \* Gebruikershandleiding

# Lifenaxx Nekmassageapparaat LX-046

Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. . Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of om producten te delen. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht .

## Geniet van uw product. \* Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

### Inhoudsopgave

Tips.....	2	Opladen.....	6
Veiligheidsinstructies.....	2	Zet apparaat aan /uit.....	6
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen.....	4	Technische specificaties .....	6
Waarschuwingen.....	4	Steun .....	6
Vrijwaring.....	4	Verzorging en onderhoud.....	7
Functies.....	4	Conformiteitsverklaring.....	7
Productoverzicht.....	6	Beschikbaarheid.....	7

### Tips

Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Ongelukken (inclusief vloeistof of vocht), onjuist of misbruik van het product, insecten, geknoei met of wijziging van het product door andere personen dan bevoegd onderhoudspersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd. Lees en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruiksaanwijzing. Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Als de netaansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze worden weggegooid. Als het niet kan worden verwijderd, moet het apparaat worden weggegooid. Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.

### Veiligheidsinstructies

- Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
- De kabel is omhuld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, omdat hierdoor de beschermende functie verloren kan gaan. Vermijd overmatige spanning op de kabel, vooral bij stopcontacten en stekkers.

- Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het snoer. Anders zou de kabel kunnen breken.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of andere bedrading niet, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen. Het product mag uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking.

### **Gebruik het massageapparaat niet:**

- op dieren
- als u lijdt aan een medische afwijking of letsel in het te masseren gebied (bijvoorbeeld een hernia, open wonden)
- in ieder geval voor massages in de omgeving van het hart als u een pacemaker draagt – en Raadpleeg uw arts als het om andere delen van het lichaam gaat
- op gezwollen, verbrande, ontstoken of beschadigde huid en lichaamsdelen van welke aard dan ook
- op snijwonden, haarvaten, spataderen, acne, couperose, herpes of andere huidziekten
- op het hoofd of op harde delen van het lichaam (bijv. botten en gewrichten)
- tijdens de zwangerschap
- op het gezicht (ogen), op het strottenhoofd of andere bijzonder gevoelige lichaamsdelen
- voor voetmassages
- tijdens het slapen
- na consumptie van medicijnen of alcohol (verminderde cognitie!)
- op de huid met eerder aangebrachte crème (bijv. verwarmende zalf),
- in voertuigen.

### **Raadpleeg uw arts voordat u het massageapparaat gebruikt, vooral:**

- als u aan een ernstige ziekte lijdt of onlangs een operatie aan uw bovenlichaam heeft ondergaan
- als u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen heeft
- als u lijdt aan trombose
- als u aan suikerziekte lijdt
- als u pijn heeft door onbekende oorzaken

## **Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen**

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen exploderen, in brand vliegen en brandwonden veroorzaken als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, verpletterd, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen, dus u moet er voorzichtig mee omgaan.

Volg deze richtlijnen om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken:

- Laat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat worden.
- Demonteer, snijd, plet, doorboor, kortsluit de batterijen NOOIT, gooi de batterijen NOOIT in vuur of water, en stel de oplaadbare batterij NOOIT bloot aan temperaturen boven 50°C.

## **Waarschuwingen**

- Haal het product niet uit elkaar, dit kan kortsluiting of schade tot gevolg hebben.
- De levensduur van de batterij neemt af bij gebruik. Laad de batterij minstens één keer per maand op om de batterij te sparen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. Bij schade kan de batterij ontploffen.
- Niet wijzigen, repareren of verwijderen zonder professionele begeleiding.
- Gebruik voor het reinigen geen bijtende of vluchtige vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet vallen en schud het niet. Hierdoor kunnen de interne printplaten of het mechanisme kapot gaan.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

## **Vrijwaring**

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct, indirect punitief, incidenteel of speciaal vervolggewaar, voor eigendom of leven, onjuiste opslag, wat dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.

## **Functies**

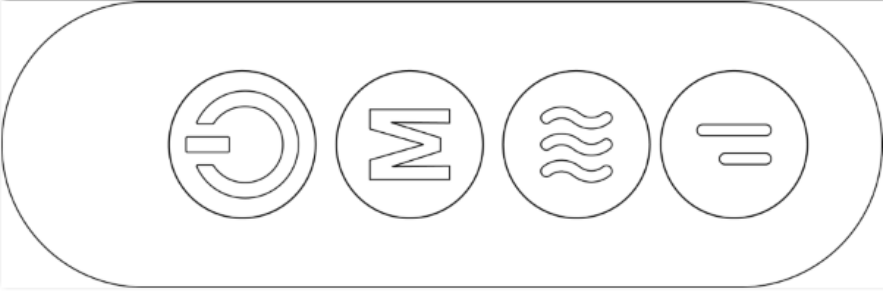




- De stimulator past zich gemakkelijk aan verschillende delen van het lichaam aan.
- De rustgevende warmte kan worden uitgeschakeld.
- U bepaalt zelf de intensiteit en het verloop van de massage.
- Met 2 verschillende modi en 2 verschillende instelbare snelheden verhoogt het het welzijn, verlicht het pijn, pijnlijke spieren, krampen en spierspanning.

●De stimulator is geschikt voor gebruik op de nek, schouders, rug, taille, buik, armen en benen.

●2 modi

●2 verschillende snelheden

## Productoverzicht

Controlepaneel			
			
	Aan / uit knop		Programma
	Verwarming (LED rood -> aan, LED groen -> uit)		Snelheid

## Opladen

● Sluit de USB-C-kabel op het apparaat aan op een USB-adapter\* (\*niet meegeleverd).

**Opmerking:** het eerste opladen duurt ongeveer 3 uur, de RODE LED knippert zolang het item wordt geladen.

## Zet apparaat aan /uit

Plaats het massageapparaat op een gekozen plaats op uw lichaam  
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat deze rood oplicht

## Technische specificaties

Batterij capaciteit	2000 mAh 7,4 V
Nominaal vermogen	10W
Draadloos gebruik, met USB-kabel en Type-C oplaadpoort	Geen gebruik tijdens het opladen
Automatische uitschakelfunctie na 10 minuten	
Verwarming binnen kon uitgeschakeld worden.	

## Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643**  
(14 cent/minuut vanaf Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).  
Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De supporthotline is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

## Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige, pluisvrije doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie. Vermijd daarom de volgende praktijken om schade te voorkomen:

- Gebruik het apparaat bij ultrahoge of ultralage temperaturen.
- Afleveren of gebruiken in een sterk schokkende omgeving.

## Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Verklaring van overeenstemming").

## Beschikbaarheid



Verwijdering van de verpakking. Sorteer het verpakkingsmateriaal op soort bij verwijdering.

Gooi karton en karton weg bij het oud papier. Folie moet worden ingediend voor de inzameling van recyclebaar materiaal.



Oude apparatuur weggooien (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recycleerbare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid! Elke



consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer kunnen worden afgevoerd, weg te gooien. gescheiden van huishoudelijk afval worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of wijk. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het weergegeven symbool hier.



Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen\* bevatten of niet, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een detailhandelaar, zodat de batterijen kunnen worden afgevoerd op een milieuvriendelijke manier.

\*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng

uw product terug naar uw inzamelpunt met de volledig lege  
batterij erin!



Gemaakt in China

Gedistribueerd door:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Duitsland

Nekmassageapparaat LX-046