

Lifenaxx® * Manual del usuario

Mini masajeador LX-025

La declaración de conformidad de este dispositivo se encuentra en el enlace de internet: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de usar el dispositivo por primera vez, lea atentamente el manual del usuario. N° de teléfono de servicio para soporte técnico: 01805 012643 (14 cent/minuto desde fijo en Alemania y 42 cent/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de

Guarde este manual del usuario como referencia en el futuro o para compartir el producto cuidadosamente. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, contacte con el vendedor o tienda en la que adquirió este producto.

Garantía de 2 años

Características

- El LifenaXX LX-025 es un dispositivo de masaje por vibraciones inalámbrico que relaja músculos tensos, aumenta la circulación y la capacidad de movimiento, y mejora la salud general de los tejidos blandos del cuerpo.
- 4 niveles de velocidad con 1200, 1800, 2400, 2800rpm.
- Batería de 7,4 voltios con 2000mAh.
- 120 min. de funcionamiento
- 4 cabezales de masaje distintos
- apagado automático después de 10 minutos
- Indicador de batería baja, el LED rojo y verde parpadea

Especificaciones técnicas


USB (sólo para uso en interiores)	5V máx. 0,8A
Batería	7,4V, 2000mAh

Uso normal

Solo para uso por adultos.

- Luz indicadora de carga: La luz indicadora roja parpadea lentamente cuando se está cargando, y la luz indicadora roja se apaga cuando está llena.
- Instale 1 de los 4 cabezales según sus necesidades.
- Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el artículo.
- Presione el botón brevemente para cambiar la velocidad.
- Use el producto exclusivamente sobre una superficie seca del cuerpo sobre la ropa presionando ligeramente y moviendo por el cuerpo aproximadamente 60 segundos cada región.
- Use el Lifenaxx LX-025 solamente en los tejidos blandos del cuerpo como desee, sin causar dolor ni incomodidad. No lo use en la cabeza ni en ninguna zona rígida u ósea del cuerpo.
- Use solamente las aplicaciones que proporcionen el mejor efecto deseado.
- Pueden producirse contusiones sin importar la configuración de control ni la presión aplicada. Compruebe las zonas tratadas con frecuencia y detenga el proceso de inmediato si existen indicios de dolor o incomodidad.
- Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo lejos del eje y la parte posterior del aplicador, podría provocar pellizcos.
- No inserte objetos en las rendijas de ventilación.

Resumen del producto

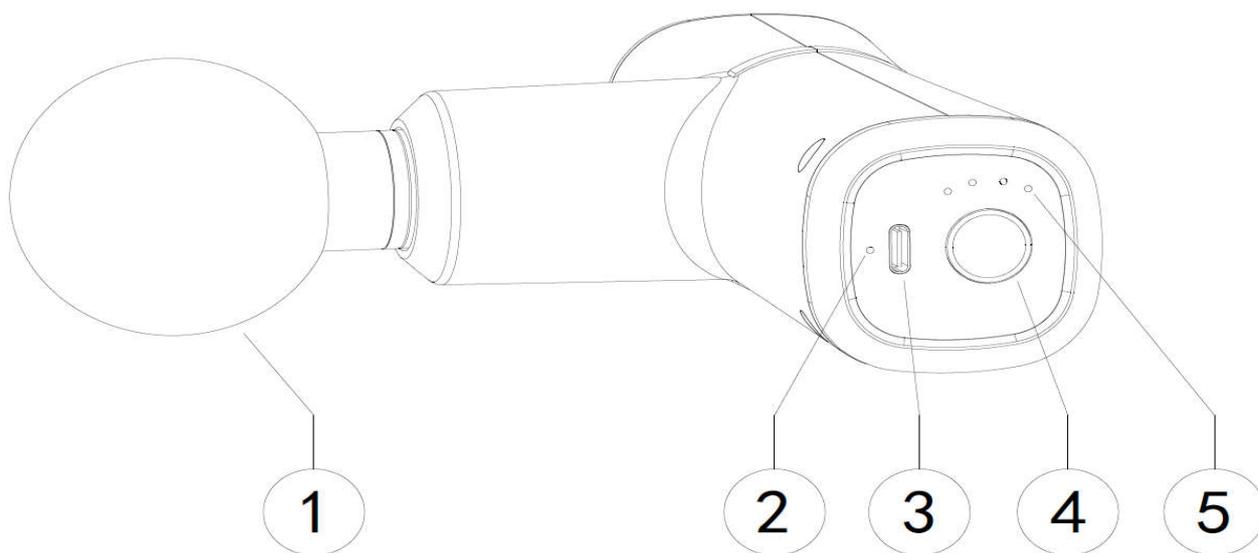

1	Cabezal de masaje	4	Botón de potencia/velocidad
2	Indicador de trabajo/carga	5	Indicación de velocidad
3	Puerto de carga de tipo C		


Cabezales de izquierda a derecha



Cabezal en horquilla:	adecuado para posición vertebral
Cabezal plano:	adecuado para cualquier parte del cuerpo
Cabezal global:	adecuado para grupos musculares
Cabezal apuntado:	adecuado para articulaciones del cuerpo

Instalar los cabezales

Instale y cambie el cabezal de masaje según sus necesidades, tire del cabezal original (imagen izquierda) e introduzca el cabezal de masaje en el agujero redondo (imagen derecha)

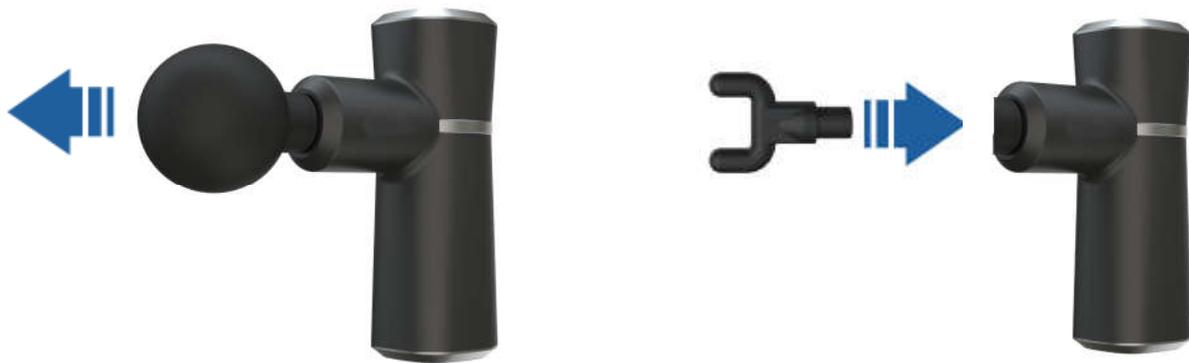

Instrucciones de seguridad


- Sólo recarga con el cable USB suministrado o compatible..
- Este dispositivo no ha sido diseñado para ser usado por niños ni personas con capacidades mentales reducidas y/o falta de experiencia.
- Este dispositivo no está diseñado para uso comercial.
- Cualquier otro uso o modificación del dispositivo se considerará inadecuada e implicará riesgos importantes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños producidos por un uso inadecuado.
- No deje nunca funcionando ni cargando el LifenaXX LX-025 sin supervisión.

NO USE EL LIFENAXX LX-025 SIN OBTENER PRIMERO LA APROBACIÓN DE SU DOCTOR SI LE ES APLICABLE CUALQUIERA DE LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daños retinales, portador de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, discos herniados, espondilólisis, espondilolisis, o espondilosos, sustitución reciente de articulaciones o DIU, clavos o placas metálicas o cualquier preocupación por su salud física. Estas contraindicaciones no implican que no pueda usar un dispositivo de vibración o ejercicio, pero recomendamos que consulte primero con un médico. Aún se están investigando los efectos de los ejercicios con vibración para trastornos médicos concretos. Probablemente resulten en la reducción de la lista de contraindicaciones listadas anteriormente. La experiencia práctica ha demostrado que la integración de ejercicios con vibración en un plan de tratamiento es recomendable en diversos casos. Debe hacerse con la recomendación y acompañamiento de un médico, especialista o fisioterapeuta.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Sólo para uso de adultos, aplicar sobre una superficie seca y limpia sobre la ropa mediante una ligera presión y movimiento sobre el cuerpo. El tiempo de aplicación no debe exceder de 60 segundos por cada región del cuerpo. Use LX-025 sólo en los tejidos blandos del cuerpo y los músculos, si siente dolor o malestar detenga el procedimiento. Use sólo los aplicadores suministrados. Los puntos de presión pueden ocurrir independientemente del ajuste, control o presión aplicada. Revise las áreas tratadas regularmente y deténgase inmediatamente a la primera señal de dolor o malestar. Mantenga los dedos, el cabello u otras partes del cuerpo alejados del eje y de la parte posterior del aplicador, ya que pueden producirse hematomas. Dado que el dispositivo requiere una ventilación adecuada durante su funcionamiento, no bloquee los ventiladores ni las ranuras de ventilación y no cubra el dispositivo. No utilice el dispositivo cerca de aberturas de calefacción o bajo la luz directa del sol. Mantenga el dispositivo seco y apáguelo cuando no lo utilice. No sumerja el dispositivo en agua. La estimulación frecuente de alta velocidad y alta presión en el mismo lugar puede causar abrasión. Si siente dolor o molestias, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

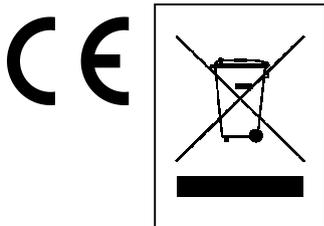

Recomendaciones de protección ambiental: Los materiales de embalaje son materias primas y pueden reciclarse. No deseche los dispositivos o baterías antiguos en la basura doméstica. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución (use prendas limpias). Evite usar materiales abrasivos y limpiadores disolventes/agresivos. Seque con precisión el dispositivo limpio. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania