

Lifenaxx® * Gebruikershandleiding

Wlan Otoscoop LX-032

De conformiteitsverklaring voor dit apparaat is te vinden op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door. Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis e-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan een derde geeft. Doe hetzelfde voor de originele accessoires van dit product. Voor meer informatie over de garantie, neem contact op met de verdeler of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Garantie 2 jaar

Dit product kan zowel op mensen als dieren worden gebruikt. Het product mag alleen worden gebruikt voor het reinigen en controleren van de gehoorgang of de neusholte. Tijdens het gebruik van het apparaat, steek het niet te diep in de openingen om het risico op letsel te vermijden.

Eigenschappen

- CMOS Camera 3MP.
- Resolutie 1920 x 1080P 30FPS.
- 6-Assige gyroscoop
- Brandpuntafstand 1,5-2cm
- Lege batterij-controlelampje

Technische gegevens

USB (alleen opladen in een droge toestand)	5V max. 0,2A
Batterij	3,7V / 250mAh
Camera	3MP 1920x1080 30FPS
Werkingstijd	60 min.
Oplaadtijd	90 min.
WLAN	Zendbereik ~8m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald transmissievermogen max. 20mW
LED	6
Diameter van de lens	3,9mm
Afmetingen	Ø1,3x 14cm
Gewicht	17g

Eerste gebruik

● Laad het apparaat volledig op met behulp van de USB-kabel. Dit kan 90 minuten duren. ● Open de APP store en zoek naar iTiMO APP. ● Installeer de APP op uw apparaat en open de APP.

● Start de otoscoop. ● Druk op het symbool . ● Een nieuw venster wordt geopend met alle beschikbare Wlan-verbindingen (Android). Voor IOS-apparaten, ga naar Instellingen, Wi-Fi. ● Kies het iTiMO-xxxx apparaat. U kunt een waarschuwing krijgen dat er op dit netwerk geen internet service beschikbaar is. ● Ga in dit geval

terug naar de iTiMO APP, druk opnieuw op de  knop en u zult nu de live video van de otoscoop zien. ● Maak de gewenste reinigingslepel vast en start voorzichtig met reinigen. ● We raden aan om de telefoon/tablet in een houder aan te brengen voor een directe weergave.

APP

	Het huidige beeld vastzetten
	De live video starten
	Een foto maken
	De video-opname starten of stoppen
	De galerij openen om de opgenomen foto's en video's te bekijken
	Een stap terugkeren
	Instellingen
	Wijzigen van rechter- naar linkerkant

Normaal gebruik

- De otoscoop mag alleen in de gehoorgang worden gestopt wanneer een lepel is aangebracht.
- Maak de lepel stevig op de otoscoop vast.
- Opgelet, de gehoorgang en de neus zijn gevoelig.

Reiniging

Reinig de camera voor en na elk gebruik.


Veiligheidsinstructies

→ Kijk niet in het LED-licht. → Laad alleen op met de inbegrepen of een

compatibele USB-kabel. → Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan expertise. → Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik. → Elk ander gebruik of wijziging van het apparaat wordt als ongepast beschouwd en brengt aanzienlijke risico's met zich mee. → De fabrikant is niet aansprakelijk voor door onjuist gebruik veroorzaakte schade. Controleer het apparaat op een juiste werking voor gebruik! → Gebruik het apparaat niet als er schade waarneembaar is. → Gebruik het apparaat niet in een explosieve of brandbare omgeving (bijv. een omgeving verzadigd met zuurstof of een narcosegas). → Dit product mag niet worden gebruikt in een gebied met een sterk magnetisch veld, bijv. een MRI-scanner. → Pas het apparaat niet aan. → Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter.

WAARSCHUWINGEN EN OPGELET:

Alleen bestemd voor gebruik door volwassenen. Gebruik het apparaat niet in de aanwezigheid van een brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of stikstofoxide of in de buurt van brandbare stoffen, dampen of gassen. Bedien het apparaat niet in de buurt van verwarmingsopeningen of in direct zonlicht. Houd het apparaat droog. Dompel het apparaat niet in water.

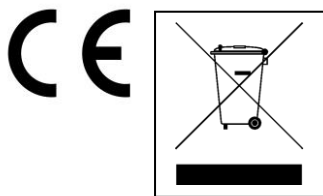

Tips voor het beschermen van het milieu:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging (gebruik een schone doek). Voorkom het gebruik van ruwe of schurende materialen, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het gereinigde apparaat grondig schoon. **Verdeler:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland