

LifenaXX[®] * Mode d'emploi

Otoscope Wi-Fi LX-032

La Déclaration de Conformité de cet appareil est sur le lien Internet : www.technaxx.de/ (dans la barre du bas "Konformitätserklärung"). Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. N° de téléphone du service d'assistance technique : 01805 012643 (14 cents/minute depuis une ligne fixe allemande et 42 cents/minute depuis des réseaux mobiles).
E-mail gratuit : support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce mode d'emploi, car vous aurez peut-être besoin de le relire ou de le partager. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Garantie de 2 ans

Ce produit est prévu pour être utilisé sur les personnes et les animaux. Il peut seulement être utilisé pour l'auscultation et le nettoyage du canal auditif ou de la cavité nasale. Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous de ne pas l'enfoncer trop profondément dans les orifices, pour éviter les blessures.

Caractéristiques

- Caméra CMOS 3MP.
- Résolution de 1920 x 1080P 30IPS.
- Gyroscope 6 axes
- Distance de mise au point 1,5-2cm
- Indicateur de niveau faible de la batterie

Caractéristiques techniques

USB (chargement en milieu sec)	5V max. 0,2A
Batterie	3,7V / 250mAh
Caméra	3MP 1920x1080 30IPS
Autonomie fonctionnement	en 60 min
Durée de charge	90 min
Wi-Fi	Distance de transmission ~8m (espace ouvert) Bande de fréquences 2,4GHz Puissance de transmission rayonnée 20mW max.
LED	6
Diamètre de la lentille	3,9mm
Dimensions	Ø1.3x 14cm

Poids	17g
-------	-----

Première utilisation

- Chargez l'appareil complètement à l'aide du câble USB. Cela peut prendre jusque 90 minutes.
- Ouvrez la boutique d'applications et recherchez l'application iTiMO.
- Installez l'application sur votre appareil et ouvrez la.

● Allumez l'Otoscope. ● Appuyez sur l'icône . ● Une nouvelle fenêtre apparaît, affichant toutes les connexions Wi-Fi disponibles (Android). Pour les appareils iOS, rendez-vous dans Réglages, Wi-Fi. ● Sélectionnez l'appareil nommé iTiMO-xxxx. Un message d'avertissement de connexion Internet manquante pourrait s'afficher.

● Rendez-vous dans l'application iTiMO, puis appuyez sur le bouton  de nouveau. La vidéo en direct capturée par la caméra de l'otoscope s'affiche. ● Attachez la curette de nettoyage de votre choix et effectuez le nettoyage avec soin. ● Nous vous suggérons de placer le téléphone/la tablette dans un support, bien en vue.

Application

	Geler l'image en direct
	Démarrer l'image en direct
	Prendre une photo
	Démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo
	Ouvrez la galerie. Vous pouvez ici trouver les photos et vidéos enregistrées.
	Pour revenir d'une étape en arrière.
	Réglages
	Basculer du côté gauche au côté droit

Utilisation normale

- L'otoscope doit seulement être inséré dans le canal auditif si une curette est installée.
- Installez la curette sur l'otoscope solidement.
- Faites attention, le canal auditif et la cavité nasale sont sensibles.

Nettoyage

Nettoyez la caméra avant et après l'utilisation


Consignes de sécurité

→ Ne regardez pas dans la lampe LED. → Rechargez uniquement en utilisant le câble USB inclus. → Cet appareil n'est pas conçu pour être

utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales limitées ou qui sont dépourvues d'expérience et/ou de connaissances spécialisées. → Ce produit n'est pas destiné pour un usage commercial. → Toute autre utilisation ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et implique des risques considérables. → Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une utilisation inadéquate. Assurez-vous de connaître les étapes correctes d'utilisation avant de commencer ! → N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages. → N'utilisez pas l'appareil dans les lieux présentant des risques élevés d'incendie ou d'explosion (par ex. les lieux saturés en oxygène ou environnement d'anesthésie). → Il est interdit d'apporter ou d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants, par ex. proche d'une machine IRM. → Ne modifiez pas l'appareil. → Ne laissez jamais l'appareil en charge sans surveillance.

MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS :

L'appareil n'est destiné qu'aux adultes : ne l'utilisez pas en présence de mélanges anesthésiques inflammables avec de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote, ou à proximité de gaz, de vapeurs ou de substances inflammables. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'orifices de chauffage ou sous la lumière directe du soleil. Maintenez l'appareil au sec. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.

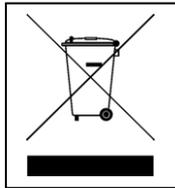

Conseils pour la préservation de l'environnement : Les emballages sont en matières non transformées et peuvent être recyclées. Ne jetez pas les appareil ne fonctionnant plus ou les batteries avec les déchets domestiques. **Nettoyage :** Protégez l'appareil contre la contamination et la pollution (utilisez un chiffon propre) Évitez d'utiliser des objets dont le matériau est rugueux ou des diluants/détergents agressifs. Essuyez le dispositif soigneusement après son nettoyage. **Distributeur :** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne