

Lifenaxx® * Manuale Utente

Otoscopio Wlan LX-032

La Dichiarazione di Conformità di questo dispositivo è consultabile tramite il link: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Konformitätserklärung"). Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si prega di leggere attentamente il manuale utente. Numero di telefono di servizio per il supporto tecnico: 01805 012643 (14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile).

Email gratuita: support@technaxx.de

Conservare attentamente questo manuale per riferimenti futuri o per accompagnare il prodotto in caso di cessione. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove questo prodotto è stato acquistato.

Garanzia di 2 anni

Questo prodotto è concepito per l'uso su umani e animali. Il prodotto può essere usato solo per pulire e controllare il canale uditivo o la cavità nasale. Quando si usa il dispositivo, assicurarsi di non penetrare troppo a fondo nelle aperture, si potrebbero causare danni.

Caratteristiche

- Telecamera CMOS 3MP.
- Risoluzione 1920 x 1080P 30FPS.
- Giroscopio a 6 assi
- Distanza messa a fuoco 1,5-2cm
- Indicatore batteria scarica

Specifiche tecniche

USB (caricare solo in condizioni asciutte)	5V max. 0,2A
Batteria	3,7V / 250mAh
Telecamera	3MP 1920x1080 30FPS
Tempo di funzionamento	60 min.
Tempo di caricamento	90 min.
Wlan	Distanza di trasmissione ~8m (spazio aperto) Banda di frequenza 2.4GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 20mW
LED	6
Diametro della Lente	3,9mm
Dimensioni	Ø1.3x 14cm
Peso	17g

Primo utilizzo

- Caricare il dispositivo completamente con il cavo USB, questo può

richiedere fino a 90 minuti. ● Aprire l'APP e cercare l'APP iTiMO. ● Installare l'APP sul proprio dispositivo e aprirla.

● Avviare l'Otoscopio. ● Premere il Simbolo . ● Una nuova Finestra apre tutte le connessioni Wlan disponibili (Android). Per i dispositivi IOS, andare alle Impostazioni, Wi-Fi. ● Selezionare il dispositivo iTiMO-xxxx, si riceverà una notifica che nessun servizio Internet è disponibile su questa rete. ● Quindi tornare

all'APP iTiMO e premere di nuovo il tasto , ora si vedrà il video live dalla telecamera dell'Otoscopio. ● Attaccare il cucchiaino di pulizia scelto e iniziare a pulire con cura. ● Suggeriamo di inserire il Telefono/ Tablet in un Supporto in vista diretta.

APP

	Congelare l'immagine attuale
	Avviare il video live
	Scattare foto
	Avviare o arrestare la registrazione video
	Aprire la galleria, qui sono presenti tutte le foto e video registrati.
	Tornare al passaggio precedente
	Impostazioni
	Cambiare da lato destro a lato sinistro

Uso normale

- L'otoscopio deve essere inserito nel canale uditivo solo con un cucchiaino installato.
- Posizionare il cucchiaino sull'otoscopio in modo che il cucchiaino sia fissato saldamente.
- Prestare attenzione, il canale uditivo e il naso sono sensibili.

Pulizia

Prima e dopo l'uso occorre pulire la telecamera.


Istruzioni di Sicurezza

→ Non guardare direttamente verso la luce LED. → Ricaricare solo con il cavo USB in dotazione o compatibile. → Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con capacità mentali limitate o carenti di esperienza e/o carenti di competenza. → Questo

dispositivo non è previsto per scopo commerciale. → Qualsiasi altro uso o modifica del dispositivo è considerato improprio e comporta rischi significativi. → Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio. Prima dell'uso controllare che il dispositivo funzioni correttamente! → Non utilizzare il dispositivo se mostra segni visibili di danni. → Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio di incendio o esplosione (ad esempio ambienti saturi di ossigeno o anestetici). → Questo prodotto non può entrare o essere usato in aree con forti campi magnetici, ad esempio scanner per la risonanza magnetica. → Non modificare il dispositivo. → Non lasciare il dispositivo incustodito mentre si ricarica.

AVVERTENZE & PRECAUZIONI:

Solo per adulti, non utilizzare il dispositivo in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto e neppure vicino a sostanze, fumi o gas infiammabili. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di aperture di riscaldamento o alla luce diretta del sole. Tenere il dispositivo asciutto. Non immergere il dispositivo in acqua.

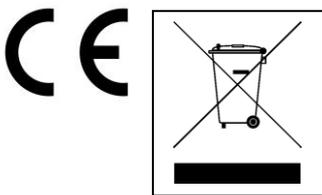

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente: I materiali degli imballaggi sono materie prime e possono essere riciclati. Non gettare vecchi dispositivi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo dalla sporcizia e dall'inquinamento (usare un telo pulito). Evitare l'uso di materiali ruvidi e a grana grossa o di solventi/detergenti aggressivi. Pulire accuratamente il dispositivo. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, Kruppstr. 105, 60388 Francoforte s.M., Germania