

Lifenaxx® * Manual del usuario

Otoscopio Wlan LX-032

La declaración de conformidad de este dispositivo se encuentra en el enlace de internet: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de usar el dispositivo por primera vez, por favor lea detenidamente el manual de usuario. N° de teléfono de servicio para asistencia técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Correo electrónico gratuito: support@technaxx.de

Guarde cuidadosamente este manual de usuario como futura referencia o si se comparte el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales para este producto. En caso de garantía, por favor contactar con el distribuidor o la tienda en la que se compró este producto.

Garantía 2 años

Este producto está pensado para usarse en humanos y animales. El producto solamente puede usarse para limpiar y comprobar el canal auditivo o la cavidad nasal. Cuando use el dispositivo, asegúrese de no penetrar demasiado en las aperturas, podría causar lesiones.

Características

- Cámara CMOS de 3MP
- Resolución de 1920 x 1080P 30FPS
- Giroscopio de 6 ejes
- Distancia focal 1,5-2cm
- Indicador de batería baja

Especificaciones técnicas

USB (cargar solamente en condiciones de agotamiento)	5V máx. 0,2A
Batería	3,7V / 250mAh
Cámara	3MP 1920x1080 30FPS
Tiempo de funcionamiento	60 min.
Tiempo de carga	90 min.
WLAN	Distancia de transmisión ~8m (espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 20mW
LED	6
Diámetro de lente	3,9mm
Dimensiones	Ø1,3x 14cm
Peso	17g

Primer uso

●Cargue por completo el dispositivo con el cable USB, puede tardar hasta 90 minutos. ● Abra la tienda de APP y busque la APP iTiMO. ●Instale la APP en su dispositivo y abra la APP.

●Active el otoscopio. ● Pulse el símbolo . ●Se abrirá una nueva ventana con todas las conexiones Wlan disponibles (Android). Para dispositivos iOS, acceda a Configuración, Wi-Fi. ● Seleccione el dispositivo iTiMO-xxxx, puede recibir una advertencia de ausencia de servicio de internet en esta red. ●Vuelva a la APP iTiMO

y pulse el botón  de nuevo, verá el video en tiempo real de la cámara del otoscopio. ●Instale la cucharilla de limpieza deseada y comience a limpiar cuidadosamente. ●Recomendamos sujetar el teléfono / tableta en un soporte a la vista.

APP

	Congelar la imagen real
	Iniciar el video en directo
	Capturar imagen
	Iniciar o detener la grabación de video
	Abrir la galería, donde encontrará las fotos y videos guardados
	Retroceder un paso
	Configuración
	Cambiar de lado derecho a izquierdo

Uso normal

- El otoscopio debe introducirse exclusivamente en el canal auditivo con una cucharilla instalada.
- Ponga la cucharilla en el otoscopio de forma que encaje perfectamente.
- Tenga cuidado, el canal auditivo y la nariz son sensibles.

Limpieza

Antes y después del uso debería limpiar la cámara.


Instrucciones de seguridad

→ No mire a la luz LED. → Recargue exclusivamente con el cable USB incluido o uno compatible. → Este dispositivo no está pensado para uso

por niños o personas con capacidad mental limitada y/o falta de experiencia. → Este dispositivo no está diseñado para uso comercial. → Cualquier otro uso o modificación del dispositivo se considerará inadecuada e implicará riesgos importantes. → El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños producidos por un uso inadecuado. ¡Compruebe el correcto funcionamiento del dispositivo antes del uso! → No use el dispositivo si muestra indicios visibles de daños, → No use el dispositivo en zonas con riesgo de incendio o explosión (como entornos saturados con oxígeno o anestesia). → Este producto no puede entrar ni usarse en zonas con campos magnéticos potentes, como ecógrafos de imagen magnética. → No modifique el dispositivo. → No deje nunca desatendido el dispositivo cuando esté cargando.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIÓN:

Sólo para uso por adultos, no usar el dispositivo en presencia de mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso, o cerca de sustancias, vapores o gases inflamables. No utilizar el dispositivo cerca de aberturas de calefacción o en luz solar directa. Mantenga seco el dispositivo. No sumergir el dispositivo en agua.

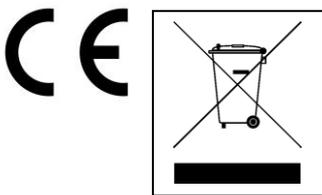

Consejos de protección medioambiental: Los materiales de embalaje son materias primas y pueden ser reciclados. No deseche dispositivos viejos ni baterías con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo de contaminación (use gamuzas limpias). Evite usar materiales rugosos, de grano grueso y limpiadores disolventes/agresivos. Frote con precisión el dispositivo limpio. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania